


Κλειστό επαγωγικό κύκλωμα LPS-4 Οδηγός χρήσης

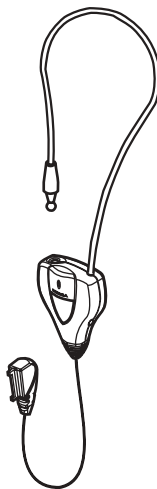

9354812

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν LPS-4 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2002-2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιοδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα συσκευή είναι δυνατό να επιφέρουν ακύρωση της αρμοδιότητας του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9354812/Τεύχος 3

1. Γενικά

Το φορητό κλειστό κύκλωμα επαγωγής LPS-4 για άτομα με ακουστικά βοηθήματα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου σε συνδυασμό με ακουστικά βοηθήματα τα οποία διαθέτουν σπείρωμα τύπου T.

Όταν χρησιμοποιείτε το κλειστό κύκλωμα επαγωγής, μπορείτε να μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή. Δεν χρειάζεται να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας, αλλά μπορείτε να το μεταφέρετε σε μια ειδική θήκη μεταφοράς, σε ένα κλιπ ζώνης ή με άλλο τρόπο. Το κλειστό κύκλωμα επαγωγής δεν χρειάζεται ξεχωριστές μπαταρίες.

Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στην τεχνολογία επαγωγής που χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους: ένα κλειστό κύκλωμα επαγωγής εκπέμπει ασύρματα ηχητικά σήματα τα οποία λαμβάνει το σπείρωμα του ακουστικού βοηθήματος, εφόσον έχει επιλεγεί η κατάσταση λειτουργίας T.

Η συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό είναι συμβατή με τηλέφωνα που διαθέτουν διασύνδεση Pop-Port™ (για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα Nokia 6681 και Nokia 6682).

Το κλειστό κύκλωμα επαγωγής μπορεί να συνδεθεί επίσης στον επεξεργαστή ομιλίας ενός συμβατού κοχλιακού εμφυτεύματος χρησιμοποιώντας την ειδική σύνδεση εξόδου ήχου.



Διαβάστε προσεκτικά αυτό τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το κλειστό κύκλωμα επαγωγής. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το κλειστό κύκλωμα επαγωγής μακριά από μικρά παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα επαγωγής και άλλες λύσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web, στη διεύθυνση <http://www.nokiaaccessibility.com/>.

2. Χρήση του κλειστού κυκλώματος επαγωγής

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

1. Τοποθετήστε το καλώδιο γύρω από το λαιμό σας και συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή του.
2. Συνδέστε το βύσμα "Pop-Port" στη βάση του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο: .
3. Ρυθμίστε το ακουστικό βοήθημα στην κατάσταση λειτουργίας T ή MT.

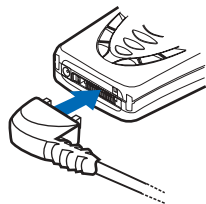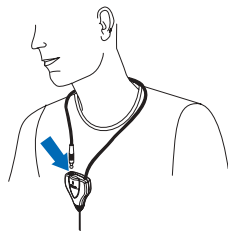

4. Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης στη συσκευή ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας. Οι κλήσεις πραγματοποιούνται με το συνήθη τρόπο (ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου).




Σημειώσεις

- Το βύσμα δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχώς συνδεδεμένο με την υποδοχή "Pop-Port" του τηλεφώνου. Έχετε τη δυνατότητα να το συνδέετε μόνο όποτε θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Όταν σας καλεί κάποιος, ειδοποιείστε και από το τηλέφωνο και από το κλειστό κύκλωμα επαγωγής εφόσον το βύσμα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο και το ακουστικό βοήθημα είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία T ή MT.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του κλειστού κυκλώματος επαγωγής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης έντασης του τηλεφώνου. Σε φυσιολογικές συνθήκες, διατηρήστε την ένταση σε χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά τη δική σας φωνή. Σε περίπτωση έντονου θορύβου από το περιβάλλον ή αδύναμου σήματος, αυξήστε την ένταση έτσι ώστε να εξασθενίσει ο θόρυβος και να ενισχυθεί η φωνή του συνομιλητή σας.

■ Σύνδεση του κλειστού κυκλώματος επαγωγής σε εξωτερικές συσκευές

Το κλειστό κύκλωμα επαγωγής μπορεί να συνδεθεί σε έναν συμβατό επεξεργαστή ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος ή στην είσοδο ήχου ενός ακουστικού βοηθήματος. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή του ακουστικού σας βοηθήματος για τη συμβατότητα με το κοχλιακό εμφύτευμα ή το ακουστικό βοήθημα, για το σωστό καλώδιο σύνδεσης, καθώς και για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τη χρήση του καλωδίου σύνδεσης.

Συνδέστε το βύσμα της εξωτερικής συσκευής στην υποδοχή εξόδου ήχου με το σύμβολο  στη δεξιά πλευρά της συσκευής κλειστού κυκλώματος επαγωγής.

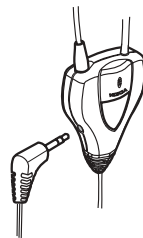

3. Τεχνικά δεδομένα

Έξοδος εξωτερικού σήματος ήχου:

- Σύνδεση: υποδοχή βύσματος 3.5-mm
- Μπορεί να συνδεθεί στην είσοδο ήχου συμβατών ακουστικών βοηθημάτων και σε έναν συμβατό επεξεργαστή ομιλίας κοχλιακών εμφυτευμάτων
- Σύνθετη αντίσταση: $>1\text{ k}\Omega$ @ 1 kHz (ονομαστική τιμή $2,2\text{ k}\Omega$ @ 1 kHz)
- Τυπική ισχύς σήματος εξόδου: 0.5– 10 mV rms
- Σύμβολο: 

Το κλειστό κύκλωμα επαγωγής μπορεί να συνδεθεί σε έναν συμβατό επεξεργαστή ομιλίας με το κατάλληλο καλώδιο που διαθέτει στερεοφωνικό ή μονοφωνικό βύσμα 3.5-mm. Ο ήχος που ακούγεται μέσα από το κλειστό κύκλωμα επαγωγής είναι πάντα μονοφωνικός.

Είσοδος εξωτερικού σήματος ήχου:

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
- Σύμβολο: 

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.
 - Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
 - Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα ηλεκτρονικά μέρη της.
 - Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
 - Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
 - Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
 - Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
 - Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
 - Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικού ελέγχου για έλεγχο.